

HeraCeram cre-active

HeraCeram® cre-active

Az Ön megoldása a magas szintű
esztétikus kidolgozáshoz

Termékinformáció



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

HeraCeram® cre-active

Az esztétikus kidolgozás megoldása.

Kreativitás találkozik a hatékonysággal: az esztétikus individualizáció egyszerűvé válik.

A HeraCeram cre-active lehetővé teszi a fogtechnikusok számára a protetikai munkák rózsaszín és fehér részeinek precíz individualizációját, például bármilyen cirkónium-dioxid vagy lítium-diszilikát anyagból készült monolitikus restaurációt hatékony és reprodukálható módon.

A kiváló minőségű 2D és 3D folyékony kerámia komponenseknek köszönhetően természetes fénydinamikus megjelenés, felületi struktúrák és áttetszőségi effektusok hozhatók létre kényelmesen. A felhasználóbarát állag biztosítja a könnyű feldolgozást és a zökkenőmentes integrációt a mindennapi laboratóriumi munkába - tökéletes esztétikai eredményekért minimális erőfeszítéssel.

Legyen cre-active - az esztétikus kidolgozás következő szintje.



Individualizált íny eset opak cirkónium-dioxidon
Készítette: Abdelhalim Fares, fogtechnikus
Egyiptom. HeraCeram cre-active
2D és 3D anyagokkal készült.
3 égetéssel valósult meg.



Előnyök egy pillantásra

- **Technikailag tökéletes:** Magas árnyalat stabilitás, optimalizált állag és összehasonlítható eredmények égetés előtt és után.
- **Optikailag tökéletes:** Természetes fénydinamikus esztétika kontrollálható fluoreszcens és opaleszcens effektusokkal, még vékony rétegekben is.
- **Egyszerűen tökéletes:** Rugalmas kialakítás fehér és rózsaszín esztétikához, a standard színezéstől a hibrid mikrorétegezésig.
- **Zökkenőmentes integráció:** Azonos tömeg megjelölések és hasonló színhatások az összes HeraCeram termékcsaládban lehetővé teszik a kidolgozási koncepciók tökéletes integrációját a bevált HeraCeram filozófiába.

Mikro-rétegezéses restauráció

Készítette:

Rüdiger Neugebauer, fogtechnikus Portugália.
Héjazva és véglegesítve hibrid technikával HeraCeram cre-active 2D anyagokkal (belső színezés) és HeraCeram Zirkonia 750 (mikro-rétegezés). 3 égetéssel valósult meg.



A HeraCeram cre-active termékcsalád anyagok széles választékát kínálja különböző árnyalatokban és állagokban.



Individualizált íny eset

Készítette: Rüdiger Neugebauer, fogtechnikus, Portugália.

HeraCeram cre-active 2D és 3D anyagokkal készült.

3 égetéssel valósult meg.



“Amit látsz azt kapod!”

Rüdiger Neugebauer
Fogtechnikus, Portugália

„A HeraCeram cre-active termékpaletta összes 2D és 3D anyaga nagyon könnyen használható. Nagy részletességgel tudok minden anyagot individualizálni és nagyon finom árnyalatokat létrehozni még wet-on-wet technikával is, anélkül, hogy az anyagok kontrollálhatatlanul keverednek. És amit különösen lenyűgözőnek találok, hogy amit látok, azt kapom! Az anyagok magas szín- és forma-stabilitása lehetővé teszi számomra, hogy megbízható és szinte azonos eredményt érjek el égetés előtt és után.”



Technikailag tökéletes

A HeraCeram cre-active fejlett 2D és 3D folyékony kerámia komponensekkel rendelkezik, amelyek részletgazdag kidolgozást és élethű eredményeket tesznek lehetővé.

Felhasználóbarát állagának és kiváló árnyalat-stabilitásának köszönhetően a HeraCeram cre-active kényelmes, reprodukálható alkalmazást tesz lehetővé olyan technikák használatával, mint a wet-on-wet színezés. Figyelemre méltó módon az anyag összehasonlítható esztétikai eredményeket produkál égetés előtt és után, egyszerűsítve a fogtechnikusok számára az elkészítési folyamatot.



21-es fog - Égetés előtt: A felhasználóbarát feldolgozási állag egyszerű wet-on-wet alkalmazást tesz lehetővé foltok vagy felhők képződése nélkül.



21-es fog - Égetés után: A paszta-szerű anyagok magas szín- és méretstabilitása garantálja az összehasonlítható eredményeket égetés előtt és után.





Egyszerűen növelje a fog fényét a HeraCeram cre-active EH Bright-tal. A translucencia megmarad.



Abdelhalim Fares

fogtechnikus, Egyiptom

“A HeraCeram cre-active teljesen újradefiniálta az esztétikus kidolgozáshoz való hozzáállásomat. A képesség, hogy mélységet és természetes translucenciát érjek el összetett rétegezés nélkül - még opak alapanyagokon is - valódi áttörés. Az anyagok kezelhetősége kivételes és precíz alkalmazást tesz lehetővé minimális erőfeszítéssel. Ez a termékcsalád nemcsak javítja az esztétikát, hanem hatékonyabbá, tervezhetőbbé és reprodukálhatóbbá teszi az összetett munkát is”

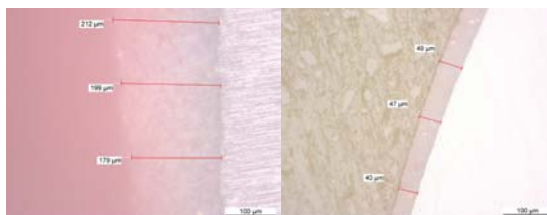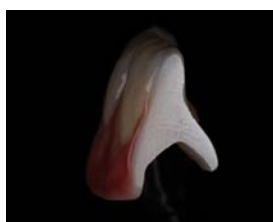

A 2D és 3D anyagokkal dinamikus eredmények érhetők el intuitív módon a rózsaszín és fehér esztétikában - köszönhetően a lenyűgöző színstabilitásnak és opacitásnak még rendkívül vékony rétegekben is. (2D színezők: ~ 40 µm, 3D struktúra paszták: ~ 212 µm, forrás: Kulzer K&F).

Készítették: Ahmadreza Maleki és Thomas Backscheider fogtechnikusok.

Optikailag tökéletes

A HeraCeram cre-active árnyalatok természetes esztétikát tesznek lehetővé kontrollálható fluoreszcens és opaleszcens effektusokkal - még vékony rétegekben is.

Az integrált mátrix filozófia dinamikus fény-optikai tulajdonságokat biztosít, mint például a természetes fluoreszcencia, opaleszcencia és translucencia, amelyek tökéletesen utánozzák a természetes fogat. Ez teszi a HeraCeram cre-active-t ideális választássá kerámia restaurációk esztétikus kidolgozásához.

Természetes opaleszcens effektusok



Lenyűgöző fénydinamikus effektusok opaleszcens HeraCeram cre-active 3D (OT) Opál Transpa tömegekkel.



Teljes kerámia restauráció átvilágításban: cirkónium-dioxid váz - kezdeti helyzet (21-es fog) vs. esztétikusan kidolgozva HeraCeram cre-active 2D és 3D anyagokkal, természetes opaleszcens effektusokat létrehozva a vágóélben (11-es fog).

Készítették: Ahmadreza Maleki és Thomas Backscheider fogtechnikusok.



Paul Fiechter

mester fogtechnikus, Svájc

“A restauráció tökéletes esztétikáját a szín, fény és struktúra megfelelő kölcsönhatása teremti meg. A mátrix filozófiával a fényesség, translucencia, fluoreszcencia és opaleszcencia specifikusan kontrollálható - ugyanúgy, mint a természetes foganyagban. A HeraCeram cre-active lehetővé teszi számomra, hogy olyan egyéni karakterizálást érjek el, amely optimálisan reprodukálja a természetes megjelenést és a teljesen monolitikus restaurációkat is új esztétikai szintre emeli.”

HeraCeram cre-active Glaze (bal) és Glaze Fluo (jobb)



Nappali fény körülmények



UV-fény körülmények



A HeraCeram cre-active termékcsalád különböző 2D és 3D anyagokat kínál, amelyekkel a fluoreszcencia aktívan kontrollálható, ahogy azt például a kétféle glazúr mutatja: Glaze (bal) és Glaze Fluo (jobb) UV fény alatt. Nappali fényben a HeraCeram cre-active Glaze Fluo nem befolyásolja a restauráció megjelenését.



11-es fog: Cirkónium-dioxid váz - kezdeti helyzet.

21-es fog: Testreszabott kidolgozás a Mátrix koncepció szerint.

Készítette: Thomas Backscheider, fogtechnikus, Németország.

HeraCeram cre-active 2D és 3D anyagokkal készült. 2 égetéssel valósult meg.



“Élethű esztétika könnyedén”

Thomas Backscheider

fogtechnikus, Németország

“A fény-optikai tulajdonságok, amelyek elérhetők a HeraCeram cre-active 2D és 3D anyagaival teljes kerámia restaurációkon, még rendkívül vékony rétegvastagságok mellett is, lenyűgözők. Ezzel a ragyogó opaleszcenciával könnyedén érhetek el élethű esztétikát.”

Egyszerűen tökéletes

A HeraCeram cre-active-t fogtechnikusok által és számukra fejlesztették ki, akik egyszerű, mégis rendkívül hatékony és esztétikus megoldást keresnek kerámia restaurációk egyéniesítéséhez és kidolgozásához. A HeraCeram cre-active konceptuálisan megtervezett termékpalettát biztosít, amely lehetővé teszi tehetségének teljes kibontakoztatását.

Akár a standard színezési technikákat, akár a hibrid mikro-rétegezési koncepciókat részesíti előnyben, a HeraCeram cre-active alkalmazkodik egyéni stílusához. Az azonos tömeg megjelölések és hasonló színhatások az összes HeraCeram termékcsaládban lehetővé teszik a kidolgozási koncepciók tökéletes integrációját a bevált HeraCeram filozófiába.

Egyszerű. Hatékony. Tökéletes.



Agata Jankowska


fogtechnikus, Lengyelország

„Már régóta nem találkoztam olyan anyaggal, amely ennyire megkönnyítené a napi munkámat. Elképesztő, hogy milyen gyorsan és könnyedén lehet spektakuláris fénydinamikus effektusokat elérni teljes kontúrú cirkónia restaurációkban a HeraCeram cre-active 3D használatával. Biztos vagyok benne, hogy miután kipróbálja őket, beleszeret majd. Én már beleszerettem!”



Video oktatóanyagok, tippek és trükkök -

A HeraCeram cre-active lépésről lépésre videó oktatóanyagok széles választéka megtalálható: kulzer.com/heraceram-creactive-video Vagy csatlakozzon valamelyik gyakorlati HeraCeram tanfolyamunkhoz!

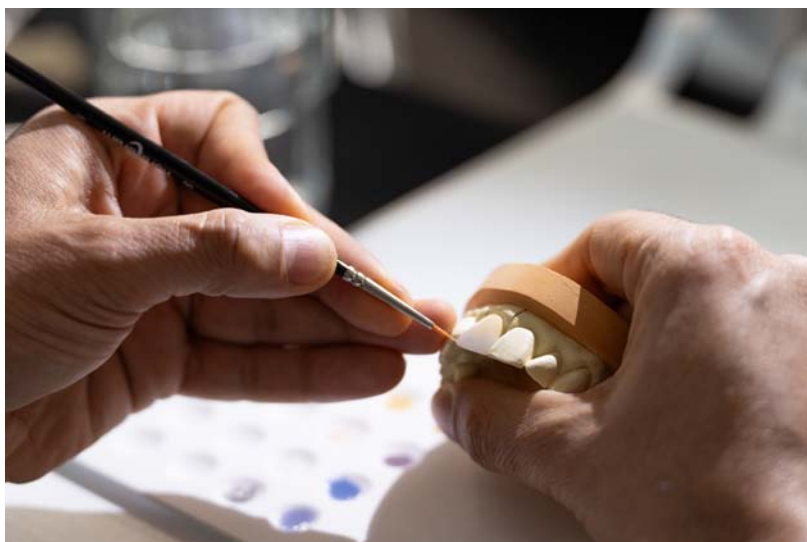

Alkalmazási koncepcióink az esztétikus kidolgozáshoz



Standard színezési koncepció



Személyre szabott színezési koncepció



3D Mátrix koncepció



Hibrid mikro-rétegezési koncepció



Íny koncepció




Esztétikus fehéritési koncepció

HeraCeram cre-active árnyalat választék

HeraCeram cre-active: **Opak (2D)**



HeraCeram cre-active: **Translucent (2D/3D)**

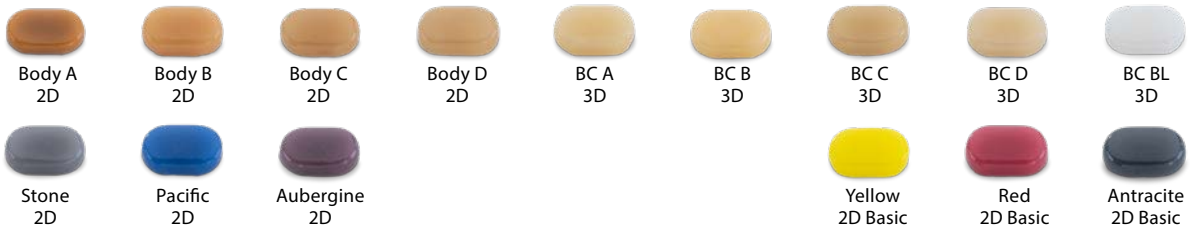

HeraCeram cre-active: **Gingiva (2D/3D)**



HeraCeram cre-active: **Matrix (2D/3D)**



Termékválaszték

Glazúr / Glazúr Fluo Paszták és Porok

2D Stains Basic

2D Stains Opaque

2D Stains Translucent

2D Mamelon Dentine

2D Secondary Dentine

2D Value Masses

2D Enhancer Mass

2D Gingiva Stains Opaque

2D Gingiva Stains Translucent

3D Opal Incisal Masses

3D Opal Transpa Masses

3D Body Correction Masses

3D Gingiva Masses

Cikkszám Név

Szettek

66094145 HC cre-act. Basic-Set (2D/3D)

66094146 HC cre-act. Matrix-Set (2D/3D)

66094147 HC cre-act. 2D Stains/Glaze-Set (2D)

66094149 HC cre-act. Gingiva-Set (2D/3D)

**Legyen cre-active - további információk a
magas szintű esztétikus kidolgozáshoz:
www.kulzer.com/heraceram-creactive**

A HeraCeram sokoldalú borító megoldást kínál számos indikációhoz és esztétikai követelményhez - Egyszerűen tökéletes!



HeraCeram Zirkonia 750 - A 'cool' megoldás LiSi és cirkónia vázakhoz.



HeraCeram Saphir - Ragyogtassa tehetségét fémvázakon.

További információk és anyagok találhatóak: kulzer.com/heraceram



Kapcsolat Németországban:

Kulzer GmbH, Leipziger
Straße 2, 63450 Hanau,
Németország,
info.lab@kulzer-dental.com,
www.kulzer.com



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Art.-No. 6610 1149

+J014661011490/S0